

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび、下記検査項目の検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、弊社事情をご賢察のうえ、ご了承賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更日 2018年 10月 1日(月) 受付分より

■ 変更内容





CODE	検査項目名	変更箇所	新	現行	検査案内	備考
3101	テストステロン	測定試薬	シメス/メルク・ダイアグノスティクス社 ケミルミ テストステロン II	シメス/メルク・ダイアグノスティクス社 ケミルミ テストステロン	P34	<ul style="list-style-type: none"> ・現行試薬の販売中止に伴う、精度の向上した改良試薬への変更。 ・基準値などの変更はありません。
		報告下限値	7未満 ng/dL	10未満 ng/dL		
3719	ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)	測定試薬	ロシュ・ダイアグノスティクス社 エクルーシス試薬 ProGRP	富士レビオ社 ルミパルス proGRP	P43	<ul style="list-style-type: none"> ・血清での測定が可能な測定原理、測定試薬への変更。 ・基準値などの変更はありません。
		検査方法	ECLIA 法	CLEIA 法		
		検査材料	血清	血漿		
		容器	A-1: 普通採血管(分縮袋入り)	E-4: EDTA-2Na 採血管		
		報告下限値	3.0未満 pg/mL	5.0未満 pg/mL		
		報告桁数	100未満: 小数点第1位 100以上: 整数	小数点第1位		
4003	リウマトイド因子 (RF)定性	測定試薬	ニッポーメディカル社 N-アッセイ RF-K ニッポー	ニッポーメディカル社 N-アッセイ TIA RF ニッポー	P62	<ul style="list-style-type: none"> ・現行試薬の販売中止に伴う検査法見直しのため。 ・基準値などの変更はありません。
		検査方法	LA法	TIA法		
4000	リウマトイド因子 (RF)定量	測定試薬	ニッポーメディカル社 N-アッセイ RF-K ニッポー	ニッポーメディカル社 N-アッセイ TIA RF ニッポー	P62	<ul style="list-style-type: none"> ・現行試薬の販売中止に伴う検査法見直しのため。 ・基準値などの変更はありません。
		検査方法	LA法	TIA法		
		単位	IU/mL	U/mL		
		報告上限値	7500以上 IU/mL	設定なし		
		報告下限値	4未満 IU/mL	4以下 U/mL		

■ 変更日 2018年 10月 1日(月) 受付分より


■ 変更内容

CODE	検査項目名	変更箇所	新	現行	検査案内	備考
3323	IgEシングルアレルゲン ヒノキ(t24)	測定試薬	サーモフィシャードиаグナステクス社 イムノキャップ 特異的IgE t24 ヒノキs	サーモフィシャードиаグナステクス社 イムノキャップ 特異的IgE t24 ヒノキ	P75 P77	<ul style="list-style-type: none"> ・同一メーカーにおける感度の向上した改良試薬への変更。 ・基準値などの変更はありません。
0691	Viewアレルギー-39	測定試薬	サーモフィシャードиаグナステクス社 Viewアレルギー-39 t24 ヒノキ のみ変更	サーモフィシャードиаグナステクス社 Viewアレルギー-39	P75 P78	

■ 相関図

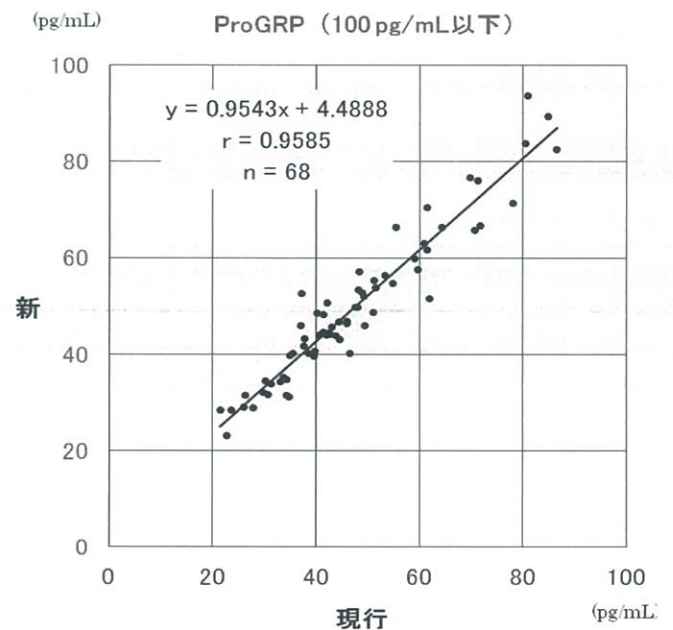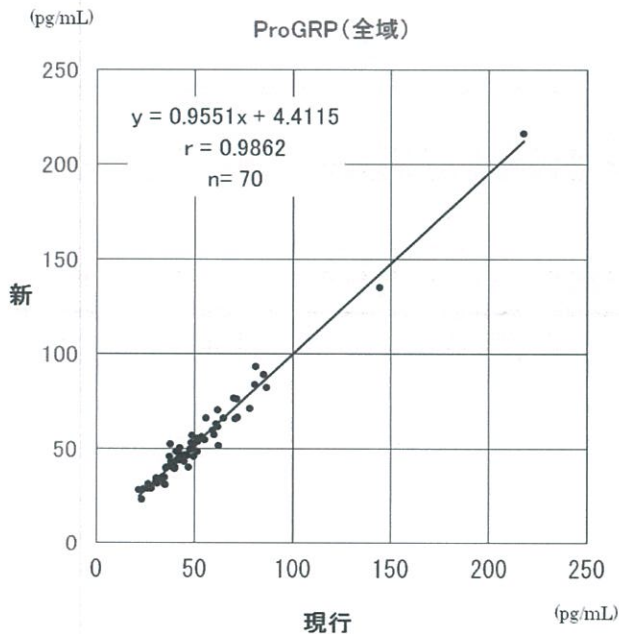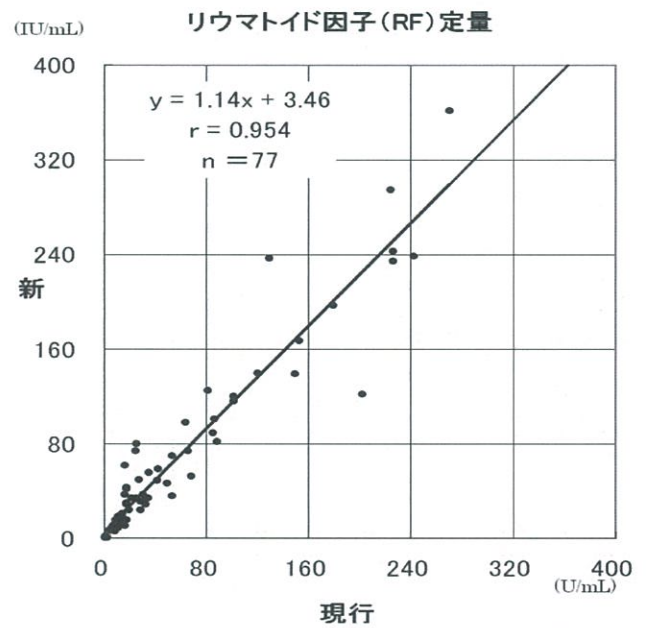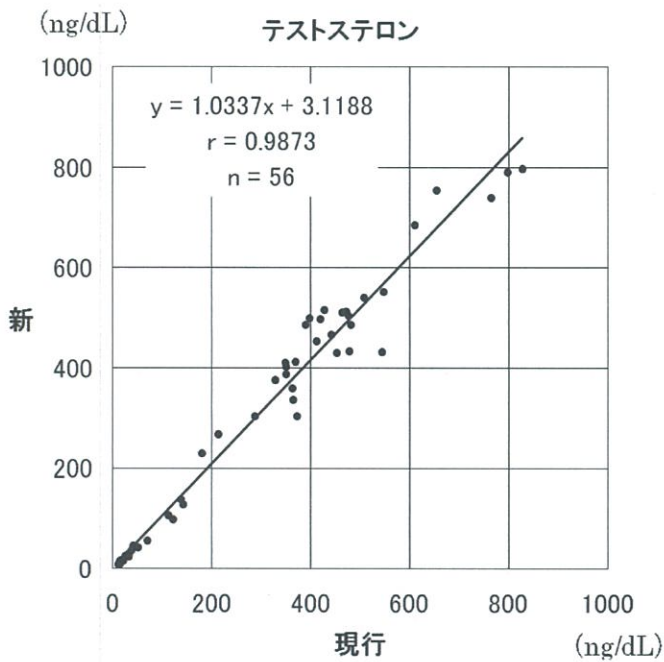

■ 相関図

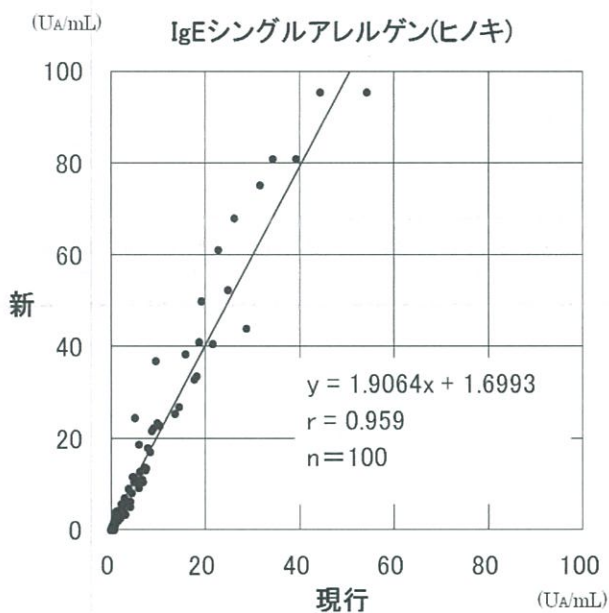

IgEシングルアレルゲン(ヒノキ)のクラス分布

(クラス) n = 100


新	6				1	4	1
5					7	1	
4				11	6		
3			9	18			
2	1	6	15				
1	7	0					
0	11	2					
	0	1	2	3	4	5	6 (クラス)
	現行						

陰性一致率 57.9% (11/19)

陽性一致率 100.0% (73/73)

判定一致率 91.3% (84/92)

<判定> (-):クラス0、(±):クラス1、(+):クラス2~6

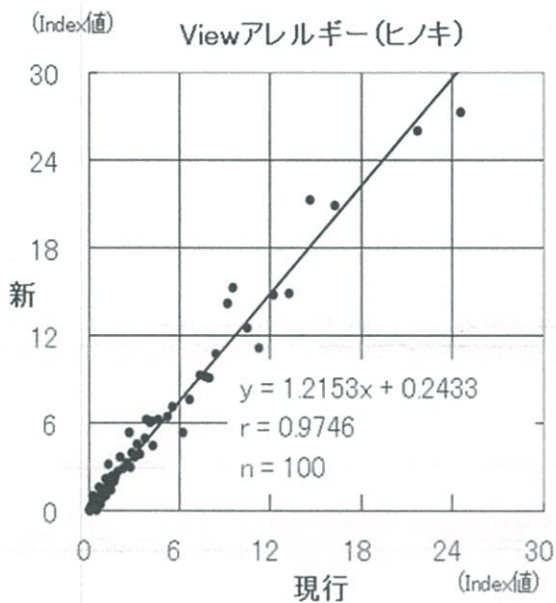

Viewアレルギー(ヒノキ)のクラス分布

(クラス) n = 100

新	6					2	1
5					2	2	
4				2	10		
3			9	19			
2		5	22				
1	1	10	1				
0	13	1					
	0	1	2	3	4	5	6 (クラス)
	現行						

陰性一致率 92.9% (13/14)

陽性一致率 98.6% (69/70)

判定一致率 97.6% (13+69)/(14+70)

<判定> (-):クラス0、(±):クラス1、(+):クラス2~6