

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
このたび、下記検査項目の検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。  
先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、弊社事情をご賢察のうえ、なにとぞ  
ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記


■ 変更日 2020年 4月 1日(水) 受付分より

■ 変更内容


項目コード	検査項目	変更箇所	新	現行	検査案内	備考
3928	心筋トロポニンT (TnT)	測定試薬	ロシュ・ダイアグノスティクス社 エクレシス試薬トロポニンT hs	ロシュ・ダイアグノスティクス社 デタナー-CL-トロポニンT	P2	・現行試薬の製造中止のため。
		検査方法	ECLIA法	CLEIA法		
		基準値	0.014 以下 ng/mL	0.012 以下 ng/mL		
		報告上限値	10.0 以上 ng/mL	25000 以上 ng/mL		
		報告下限値	0.003 未満 ng/mL	0.002 未満 ng/mL		
1115	ケトン体分画 《静脈血》	測定試薬	(3-ヒドロキシ酪酸) カインス社 3HB-L試薬 カインス	(3-ヒドロキシ酪酸) カインス社 3HB カインス	P12	・改良試薬発売に伴う現行試薬の販売中止のため。 ・基準値などの変更はありません。
			(総ケトン体) カインス社 TKB-L試薬 カインス	(総ケトン体) カインス社 TKB カインス		
2659	TSHレセプター抗体(第3世代)	報告上限値	40.0 IU/L	400.0 IU/L	P63	・希釈測定に用いる陰性ヒトプール血清の販売中止のため。

■ 相関図


心筋トロポニンT (全域)

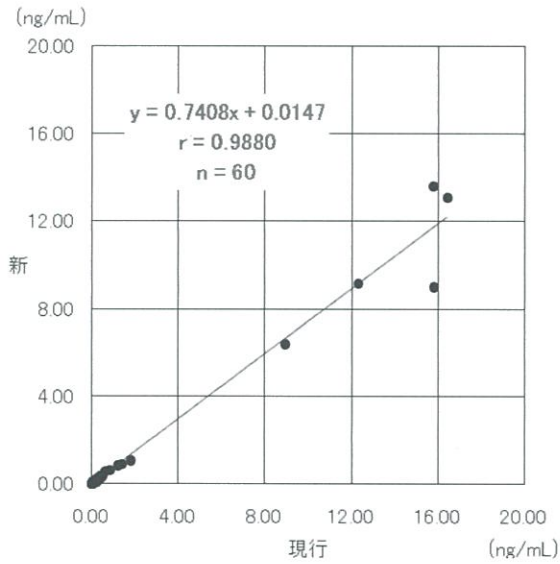


心筋トロポニンT (低値域: 0.200 ng/mL以下)

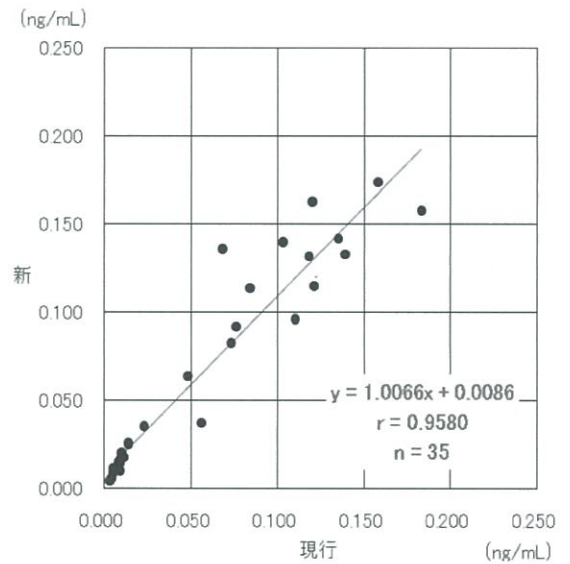

ケトン体分画(3-ヒドロキシ酪酸)

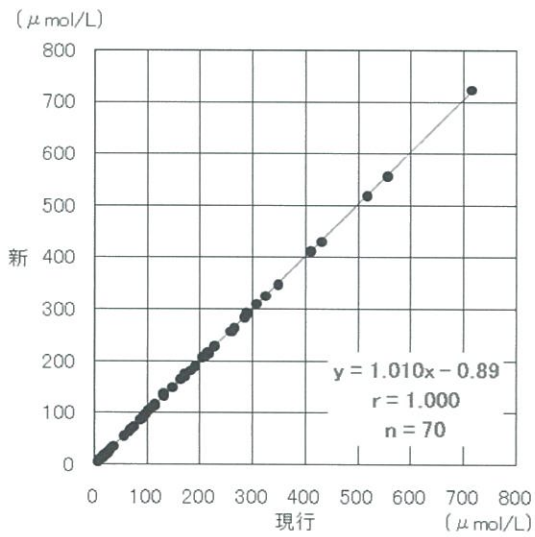

ケトン体分画(総ケトン体)

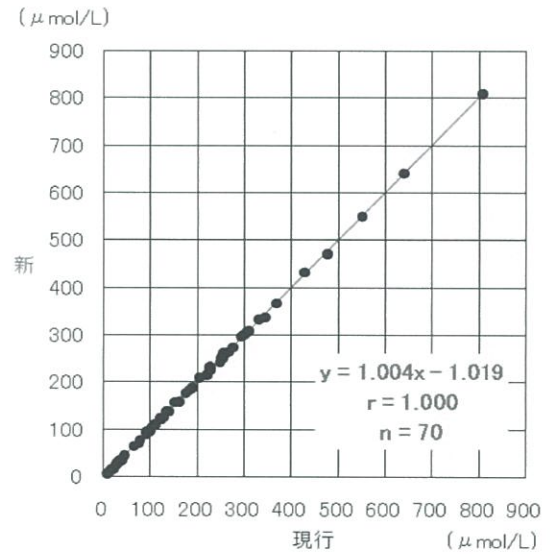

(自社検討データ)